



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Apósito espuma hidrófila + silicona
Marca:	Cranberry.
Material:	Espuma de poliuretano hidrófila más silicona de grado médico
Color:	Espuma blanca
Tallas:	Única. 10x10 cm
Presentación:	Caja x 10 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	El apósito espuma hidrófila más silicona es un dispositivo médico usado en curación de heridas agudas y/o crónicas que requieren absorber líquidos y/o secreciones de moderada a abundante cantidad. La silicona integrada en la espuma permite un suave y firme contacto con la herida, formando un sello entre el apósito y la herida, evitando su desplazamiento. Este dispositivo garantiza que el apósito absorba el exudado de la herida, y que este no se filtre hacia la superficie de la piel circundante.		
Libre de Látex:	Sí.	Estéril:	Sí, óxido de etileno.
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	En un lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30°C. Humedad hasta el 80%.		
Uso:	Dispositivo médico de un solo uso. No reutilizar.		
Empaque:	Envase bilaminado; transparente por un lado y opaco por el otro con los datos de la trazabilidad impresos.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Este apósito tiene una cara interna adhesiva compuesta por espuma más silicona, esta cara está protegida por 2 suaves láminas de polietileno.
- La cara externa no tiene componentes adhesivos.
- El apósito tiene una textura blanda, suave, adhesiva y flexible.
- El apósito de espuma hidrófila tiene una innovadora tecnología de silicona incorporada, lo que mezcla una alta capacidad de absorción y de fijación a los bordes de la herida, evitando su deslizamiento y favoreciendo su acción cicatrizante.
- El apósito absorbe moderada a alta cantidad de fluidos.
- El apósito no se adhiere al lecho de la herida.
- Las capas de espuma absorben las secreciones, reteniendo el exudado y evaporando la humedad.
- El apósito mantiene un ambiente de humedad controlada en la herida favoreciendo la formación de tejido granulatorio, y evitando la maceración de los bordes.
- Es el apósito elegido para el manejo de úlceras por presión en el área sacra, laceraciones, abrasiones, quemaduras, úlceras venosas, úlceras arteriales y úlceras diabéticas.
- Entre los usos extendidos este apósito de espuma más silicona permite el acolchonamiento de la piel que está bajo los sitios de inserción de tubos y drenajes.
- Proveedor indica que el apósito es de uso prolongado, permaneciendo en contacto con heridas hasta 7 días de manera continua.
- El tiempo de uso final, estará siempre a cargo de los profesionales de salud según su evaluación clínica.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código Interno	Ancho	Largo	Espesor	Peso
AAAESI10	10 cm $\pm$ 0,2	10 cm $\pm$ 0,2	7 mm $\pm$ 0,2	8,8 gramos $\pm$ 0,2

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con la siguiente certificación:
 - Certificado ISO 13485 - 2016.

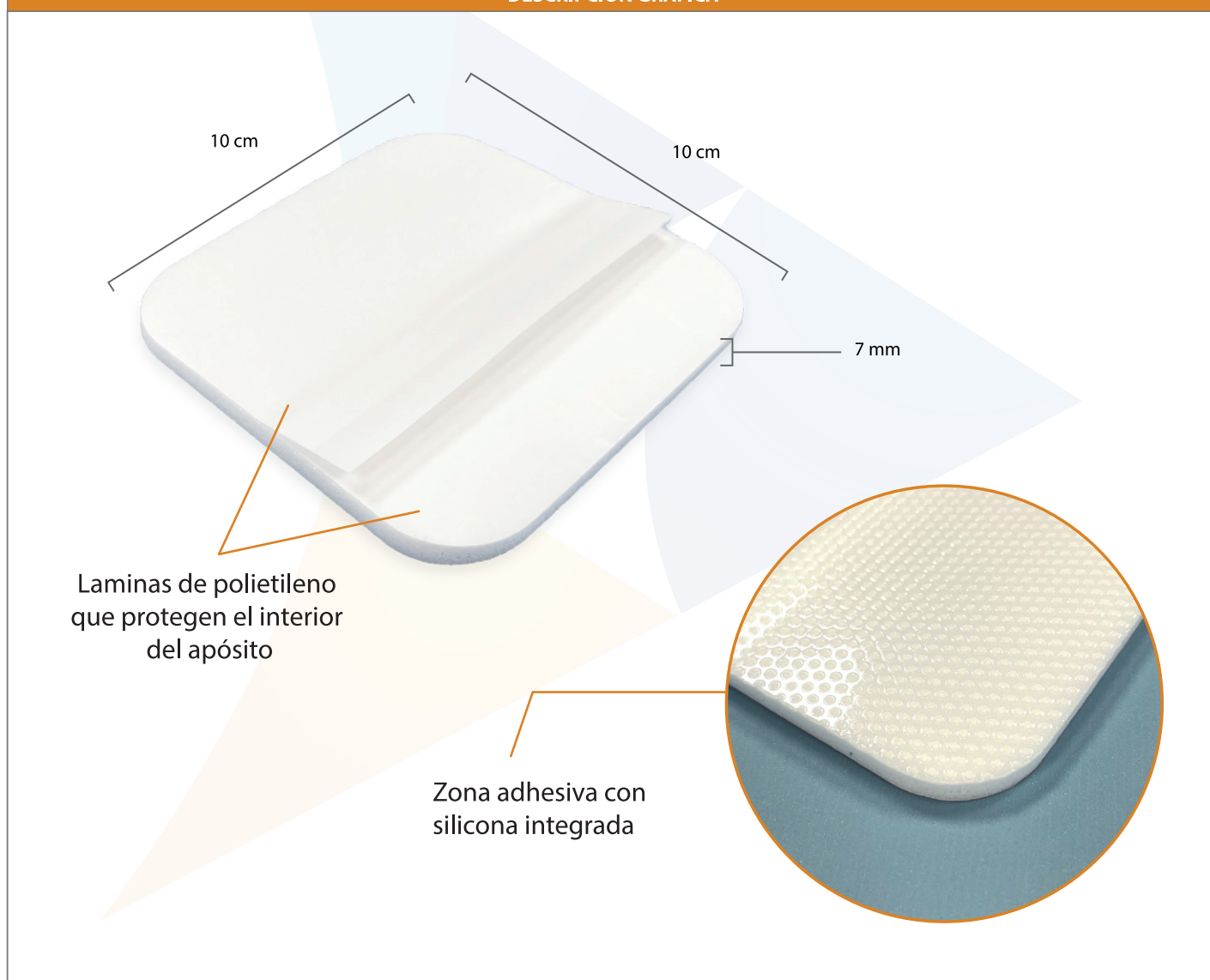DESCRIPCIÓN GRÁFICA


Producto importado y comercializado por **REUTTER S.A.**

Ficha Técnica V-00 **propiedad de Empresas Reutter**. Prohibida su reproducción total o parcial, sin consentimiento de la empresa.

✉ contacto@reutter.cl

☎ +56 2 2489 7000


📍 Av. El Salto 4447, Huechuraba, Santiago

www.reutter.cl

DESCRIPCIÓN GRÁFICA



La silicona integrada en la espuma aporta una firme pero suave adherencia del dispositivo.

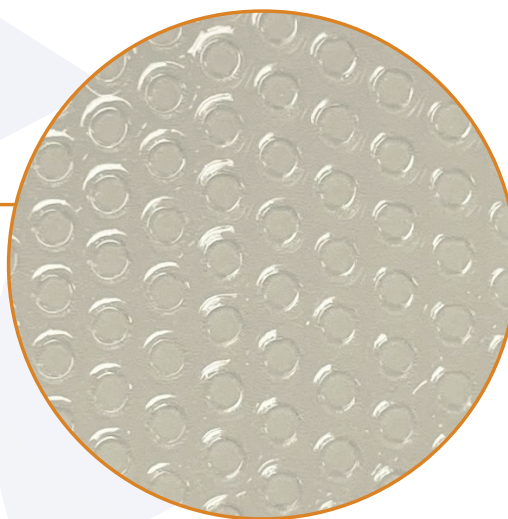

Textura de la zona de adherencia de silicona



Presentación: Caja con 10 unidades de apósito espuma hidrófila + silicona en envases individuales estériles.

*Advertencia: No usar en pacientes alérgicos a la silicona.

Producto importado y comercializado por **REUTTER S.A.**

Ficha Técnica V-00 **propiedad de Empresas Reutter**. Prohibida su reproducción total o parcial, sin consentimiento de la empresa.

✉ contacto@reutter.cl

☎ +56 2 2489 7000

📍 Av. El Salto 4447, Huechuraba, Santiago

www.reutter.cl